




Bestens gerüstet für die ANA-Diagnostik

Große Auswahl an Such- und Bestätigungstests

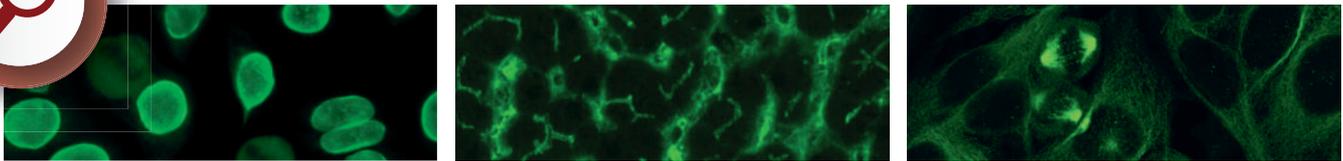

Suchtest auf Goldstandardniveau

- **Indirekter Immunfluoreszenztest (IIFT)** mit humanen Epithelzellen (HEp-2) für die Differenzierung von 15 nukleären, 9 cytoplasmatischen und 5 mitotischen Mustern gemäß ICAP *
- Erleichterte Auswertung der IIFT-Muster auf HEp-2-Zellen durch die Kombination mit Gewebeschnitten in BIOCHIP-Mosaiken
- Mehr Zellen in Mitosestadien dank Verwendung von HEp-20-10-Zellen (HEp-2-Zellvariante mit erhöhter Teilungsrate)

* International consensus on ANA pattern: www.anapatterns.org



Komplettes Methodenspektrum monospezifischer Bestätigungstests

ELISA & ChLIA

- Antigene im Gemisch oder separat als Profil für den effizienten Nachweis der prävalentesten Antikörper
- Einzelparameter-tests für die quantitative Bestimmung

EUROLINE

- Multiplex-tests für die parallele Bestimmung von bis zu 23 Autoantikörpern in einer Inkubation
- Große Auswahl an Parameterkombinationen: von umfangreichen ENA-Profilen bis hin zu spezifischen Indikationsprofilen für z. B. die Myositis- oder Systemsklerose-Diagnostik



Flexible Automatisierungs- und Softwarelösungen für jedes Testsystem

Weitere Informationen und Produkte finden Sie auf
<https://www.euroimmun.de/de/produkte/autoimmundiagnostik/>

